

# XPERIENCE<sup>®</sup>

## Advanced Surgical Irrigation

### INSTRUCTIONS FOR USE

#### DESCRIPTION:

XPERIENCE Advanced Surgical Irrigation is a clear, colorless solution intended for cleansing and removal of debris, including microorganisms from wounds.

Contains: Sodium Lauryl Sulfate, Citric Acid, Sodium Citrate, and Water.

#### INDICATIONS FOR USE:

XPERIENCE Advanced Surgical Irrigation is indicated for use in cleansing and removal of debris, including microorganisms, from wounds.

#### WARNINGS/PRECAUTIONS:

- NOT FOR IV USE - This product has been tested as a wound wash only.
- External use only.
- The product is single-use and should be applied only once in a 24-hour period.
- Discard any unused solution.
- Do not use if there is a history of allergy to any of the ingredients.
- Avoid use and contact with eyes, ears and nasal passages.
- Do not use if container is damaged.
- Potential for temporary burning or discomfort may occur.
- Do not use with fibrin sealants due to the risk of material degradation. Application of fibrin sealants in the presence of XPERIENCE Advanced Surgical Irrigation may impact sealant setup.
- If product contacts unintended anatomy or materials, rinse away solution after irrigation.
- The Stryker StrykeFlow II laparoscopic irrigator does not provide adequate pressure to remove debris when used with XPERIENCE Advanced Surgical Irrigation.
- Do not use in the case of substantial tissue loss.
- Use XPERIENCE Advanced Surgical Irrigation with standard hemostatic techniques, per procedural protocol, to support the management of bleeding and avoid delays in achieving hemostasis.

#### STORAGE AND HANDLING:

Store at 15°C to 25°C (59°F to 77°F). Excursions permitted.

XPERIENCE Advanced Surgical Irrigation may be cloudy prior to warming and is normal.

#### HOW SUPPLIED:

XPERIENCE Advanced Surgical Irrigation is supplied in 500 mL single-dose semi-flexible container.



## INSTRUCTIONS FOR USE















XPERIENCE Advanced Surgical Irrigation may be warmed to body temperature prior to administration.

For Powered Irrigation (Following aseptic technique):

1. Check for leaks by squeezing container firmly. Discard unit if leaks are found, as sterility may be compromised.
2. Remove either foil tab from the cap to expose the seal port.
3. Insert piercing pin (spike) into the rubber seal port until the pin is firmly seated. Two ports are offered for convenience.
4. Hang the container, with the rubber seal port facing down.
5. Irrigate the wound bed with the contents of the supplied container following the manufacturer's instructions of the irrigation device. Serosanguineous fluid may be observed.
6. Suction excess solution and debris throughout the procedure.
7. Discard any unused solution.

For Manual Decanting (Following aseptic technique):

1. Check for leaks by squeezing container firmly. Discard unit if leaks are found, as sterility may be compromised.
2. Remove either foil tab from the cap to expose the seal port.
3. Remove the cap from the piercing pin (spike).
4. Spike into the rubber seal port until the pin is firmly seated. Two ports are offered for convenience.
5. Remove the fluid outlet cap from the piercing pin (spike) and squeeze the bottle to decant the solution into a container.
6. Irrigate the wound bed following standard practice. Serosanguineous fluid may be observed.
7. Suction excess solution and debris throughout the procedure.
8. Discard any unused solution.

	Not for intravenous (IV) use		Sterilized using steam or dry heat; Sterile fluid path
	Do not use if package is damaged		Quantity
	Do not re-sterilize		List of ingredients
	Batch code		Do not re-use
	Catalogue number		Use-by date
	Caution		Consult instructions for use
	Temperature limit		Manufacturer
<b>Rx Only</b>	CAUTION: Federal Law restricts this product to sale and use by or on the order of a physician		

**Australian Sponsor:**  
 Emergo Australia  
 Level 20 Tower II  
 Darling Park  
 201 Sussex Street  
 Sydney, NSW 2000  
 Australia



**Manufactured By:**  
 Osartis GmbH  
 Auf der Beune 101  
 64839 Münster, Germany

**Distributed By:**  
 OsteoRemedies, LLC  
 6800 Poplar Ave, Suite 120  
 Memphis, TN 38138  
 Phone: 901-453-3141  
 www.osteoremedies.com

# XPERIENCE®

## Advanced Surgical Irrigation

### MODE D'EMPLOI

#### DESCRIPTION :

XPERIENCE Advanced Surgical Irrigation est une solution limpide et incolore destinée à nettoyer et à éliminer les saletés ou débris, y compris les micro-organismes, des plaies.

Composition : Laurylsulfate de sodium, acide citrique, citrate de sodium et eau.

#### INDICATIONS D'EMPLOI :

XPERIENCE Advanced Surgical Irrigation est indiquée pour le nettoyage et l'élimination des saletés ou débris, y compris les micro-organismes, des plaies.

#### AVERTISSEMENTS/PRÉCAUTIONS :

- NE DOIT PAS ÊTRE ADMINISTRÉ PAR VOIE INTRAVEINEUSE - Ce produit a été testé uniquement pour le lavage des plaies.
- Usage externe uniquement.
- Le produit est à usage unique et doit être appliqué une seule fois par période de 24 heures.
- Jeter toute solution inutilisée.
- Ne pas utiliser en cas d'antécédents d'allergie à l'un des ingrédients.
- Éviter toute utilisation et tout contact avec les yeux, les oreilles et les voies nasales.
- Ne pas utiliser si le contenant est endommagé.
- Un risque de brûlure ou d'inconfort temporaire peut survenir.
- Ne pas utiliser avec des colles de fibrine en raison du risque de dégradation des matériaux. L'application de colles de fibrine en présence de XPERIENCE Advanced Surgical Irrigation peut avoir un impact sur la prise de la colle.
- Si le produit entre en contact accidentellement avec l'anatomie du patient ou les matériaux, rincer la solution après l'irrigation.
- L'irrigateur laparoscopique Stryker StrykeFlow II ne fournit pas une pression suffisante pour éliminer les saletés ou débris lorsqu'il est utilisé avec XPERIENCE Advanced Surgical Irrigation.
- Ne pas utiliser en cas de perte substantielle de tissus.
- Utiliser XPERIENCE Advanced Surgical Irrigation en suivant des techniques hémostatiques standard, conformément au protocole de l'intervention, pour assurer la prise en charge des hémorragies et éviter de retarder l'hémostase.

#### ENTREPOSAGE ET MANIPULATION :

Conserver entre 15 °C et 25 °C (59 °F et 77 °F). Écarts de température permis.

Il est normal que XPERIENCE Advanced Surgical Irrigation puisse présenter un aspect trouble avant le réchauffement.

#### PRÉSENTATION :

XPERIENCE Advanced Surgical Irrigation est fournie dans un contenant semi-flexible de 500 ml à dose unique.



## MODE D'EMPLOI














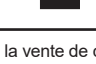
XPERIENCE Advanced Surgical Irrigation peut être réchauffée à la température du corps avant son administration.

Irrigation motorisée (en suivant une technique aseptique) :

1. Vérifier l'absence de fuites en appuyant fermement sur le contenant. Jeter l'unité si des fuites sont détectées car la stérilité du contenu peut être compromise.
2. Retirer l'une des languettes en papier aluminium du bouchon pour exposer l'orifice du joint.
3. Insérer la broche de perforation (perforateur) dans l'orifice du joint en caoutchouc jusqu'à ce que le perforateur repose fermement en place. Deux orifices sont proposés pour plus de facilité.
4. Suspendre le contenant, avec l'orifice du joint en caoutchouc vers le bas.
5. Irriguer le lit de la plaie avec le contenu de la poche fournie en suivant les instructions du fabricant du dispositif d'irrigation. Du liquide séro-sanguin peut être observé.
6. Aspirer l'excédent de solution et les débris tout au long de la procédure.
7. Jeter toute solution inutilisée.

Décantation manuelle (en suivant une technique aseptique) :

1. Vérifier l'absence de fuites en appuyant fermement sur le contenant. Jeter l'unité si des fuites sont détectées car la stérilité du contenu peut être compromise.
2. Retirer l'une des languettes en papier aluminium du bouchon pour exposer l'orifice du joint.
3. Retirer le bouchon de la broche de perforation (perforateur).
4. Percer l'orifice du joint en caoutchouc jusqu'à ce que le perforateur repose fermement en place. Deux orifices sont proposés pour plus de facilité.
5. Retirer le bouchon de sortie du liquide de la broche de perforation (perforateur) et presser le flacon pour décanter la solution dans un contenant.
6. Irriguer le lit de la plaie en suivant la pratique standard. Du liquide séro-sanguin peut être observé.
7. Aspirer l'excédent de solution et les débris tout au long de la procédure.
8. Jeter toute solution inutilisée.


	Ne doit pas être administrée par voie intraveineuse		Stérilisé à la vapeur ou à la chaleur sèche; chemin de fluide stérile
	N'utiliser le produit que si l'emballage est intact		Quantité
	Ne pas restériliser		Liste des ingrédients
	Code de lot		Ne pas réutiliser
	Numéro de référence		Date limite d'utilisation
	Attention		Consulter le mode d'emploi
	Limite de température		Fabricant
<b>Rx Only</b>	ATTENTION : la loi fédérale n'autorise la vente de ce dispositif que sur ordonnance ou par un médecin		

### Sponsor Australien:

Emergo Australia  
Level 20 Tower II  
Darling Park  
201 Sussex Street  
Sydney, NSW 2000  
Australia



XPERIENCE Advanced Surgical Irrigation IFU  
Mode d'emploi  
NMS-40012 Rev. P  
File Number: 135-0851-02

 **Fabriqué par:**  
Osartis GmbH  
Auf der Beune 101  
64839 Münster, Germany

**Distribué par:**  
OsteoRemedies, LLC  
6800 Poplar Ave, Suite 120  
Memphis, TN 38138  
Phone: 901-453-3141  
www.osteoremedies.com

OsteoRemedies et la marque d'entreprise sont des marques commerciales d'OsteoRemedies, LLC, et XPERIENCE est une marque déposée d'Osartis GmbH. © 2025, OsteoRemedies, LLC. Tous droits réservés.

# XPERIENCE®

## Advanced Surgical Irrigation

### INSTRUCCIONES DE USO

#### DESCRIPCIÓN:

XPERIENCE Advanced Surgical Irrigation es una solución transparente e incolora destinada a limpiar y eliminar residuos y microorganismos de las heridas.

Contiene: laurilsulfato de sodio, ácido cítrico, citrato de sodio y agua.

#### INDICACIONES DE USO:

La solución XPERIENCE Advanced Surgical Irrigation está indicada para limpiar y eliminar residuos y microorganismos de las heridas.

#### ADVERTENCIAS/PRECAUCIONES:

- NO APTO PARA ADMINISTRACIÓN INTRAVENOSA: Este producto se ha evaluado únicamente para el lavado de heridas.
- Exclusivamente para uso externo.
- El producto es de un solo uso y deberá aplicarse únicamente una vez cada 24 horas.
- Deseche toda la solución que sobre.
- No debe emplearse en personas con antecedentes de alergia a cualquiera de los ingredientes.
- Evite su uso y contacto con los ojos, los oídos o los conductos nasales.
- No debe emplearse si el envase está dañado.
- Podría producir quemaduras o molestias pasajeras.
- No debe emplearse con selladores de fibrina debido al riesgo de degradación de los materiales. La aplicación de selladores de fibrina en presencia de la solución XPERIENCE Advanced Surgical Irrigation podría afectar adversamente el fraguado de los selladores.
- Si el producto entra en contacto con una región anatómica o materiales no indicados, enjuague la solución después de la irrigación para eliminarla.
- El irrigador laparoscópico Stryker StrykeFlow II no produce suficiente presión para eliminar los residuos cuando se usa con la solución XPERIENCE Advanced Surgical Irrigation.
- No debe emplearse en caso de que haya una considerable pérdida de tejidos.
- Use XPERIENCE Advanced Surgical Irrigation con técnicas hemostáticas estándares, según el protocolo del procedimiento, para facilitar el manejo del sangrado y evitar demoras en el logro de la hemostasia.

#### CONSERVACIÓN Y MANEJO:

Conservar entre 15 y 25 °C (59 y 77 °F). Se permiten oscilaciones de temperatura.

La solución XPERIENCE Advanced Surgical Irrigation podría estar turbia antes de entibiarse; eso es normal.

#### PRESENTACIÓN:

La solución XPERIENCE Advanced Surgical Irrigation se presenta en un envase semiflexible monodosis de 500 ml.



## INSTRUCCIONES DE USO










La solución XPERIENCE Advanced Surgical Irrigation podrá entibiarse hasta la temperatura corporal antes de administrarse.

Para irrigación eléctrica (siguiendo técnicas asépticas):

1. Apriete firmemente el envase para comprobar que no tenga fugas. Si detectara alguna fuga, deseche la unidad, ya que podría haberse comprometido la esterilidad.
2. Retire cualquiera de las lengüetas metálicas de la tapa para poner al descubierto el orificio de sellado.
3. Inserte la espiga de perforación (punzón) en el orificio del sello de goma hasta que la espiga calce firmemente en su lugar. Para mayor comodidad, se ofrecen dos orificios.
4. Cuelgue el envase orientando el orificio del sello de goma hacia abajo.
5. Irrigue el lecho de la herida con el contenido del envase que se suministra, siguiendo las instrucciones del fabricante del dispositivo de irrigación. Podría observarse líquido serosanguinolento.
6. Aspire el exceso de solución y los residuos a lo largo del procedimiento.
7. Deseche toda la solución que sobre.

Para decantación manual (siguiendo técnicas asépticas):

1. Apriete firmemente el envase para comprobar que no tenga fugas. Si detectara alguna fuga, deseche la unidad, ya que podría haberse comprometido la esterilidad.
2. Retire cualquiera de las lengüetas metálicas de la tapa para poner al descubierto el orificio de sellado.
3. Retire la tapa de la espiga de perforación (punzón).
4. Perfore el orificio del sello de goma con la espiga hasta que esta calce firmemente en su lugar. Para mayor comodidad, se ofrecen dos orificios.
5. Retire la tapa de salida de líquidos de la espiga de perforación (punzón) y apriete el envase para decantar la solución dentro de un recipiente.
6. Irrigue el lecho de la herida siguiendo la práctica habitual. Podría observarse líquido serosanguinolento.
7. Aspire el exceso de solución y los residuos a lo largo del procedimiento.
8. Deseche toda la solución que sobre.

	No apto para su uso por vía i.v.		Esterilizado mediante vapor o calor seco; vía de líquido estéril
	No debe emplearse si el envase está dañado		Cantidad
	No reesterilizar		Lista de ingredientes
	Código del lote		No reutilizar
	Número de catálogo		Fecha de caducidad
	Advertencia		Consultar las instrucciones de uso
	Límite de temperatura		Fabricante
<b>Rx Only</b>	ADVERTENCIA: Las leyes federales permiten la venta y el uso de este producto únicamente a médicos o bajo prescripción facultativa.		

### Patrocinadora Australiana:

Emergo Australia  
Level 20 Tower II  
Darling Park  
201 Sussex Street  
Sydney, NSW 2000  
Australia



**Fabricado por:**  
Osartis GmbH  
Auf der Beune 101  
64839 Münster, Germany

**Distribuido por:**  
OsteoRemedies, LLC  
6800 Poplar Ave, Suite 120  
Memphis, TN 38138  
Phone: 901-453-3141  
www.osteoremedies.com

XPERIENCE Advanced Surgical Irrigation IFU  
Instrucciones de uso  
NMS-40012 Rev. P  
File Number: 135-0851-02

OsteoRemedies y la marca corporativa son marcas comerciales de OsteoRemedies, LLC, y XPERIENCE es una marca registrada de Osartis GmbH. © 2025, OsteoRemedies, LLC. Reservados todos los derechos.